



**Associazione Italiana Allevatori
Laboratorio Standard Latte**

PROGRAMMA

Dati **A**nalisi **M**etodi **O**rganizzazione **C**onfronti **L**aboratori **E**sperti

RING TEST CRIOSCOPIA

DICEMBRE 2010

VIA DELL'INDUSTRIA 24 - 00057 MACCARESE ROMA
Tel. 06 6678830 Fax. 06 6678811 e-mail ls1@aia.it



Associazione Italiana Allevatori Laboratorio Standard Latte

VALUTAZIONE DEL RING TEST

Nella descrizione della valutazione del Ring Test sarà seguita l'impaginazione del documento. L'argomento trattato sarà indicato dal nome o riferimento alla tabella.

➤ Ordinamento laboratori

Nella tabella è riportato l'ordinamento dei laboratori ottenuto dal calcolo della distanza euclidiana secondo la seguente formula:

$$D = \sqrt{(m \text{ diff})^2 + st^2}$$

Dove:

D = distanza euclidiana dall'origine degli assi ;

m diff = differenza tra la media dei risultati del laboratorio ed il valore di riferimento;

st = scarto tipo delle differenze tra i singoli risultati del laboratorio e i singoli valori di riferimento.

La differenza dal valore di riferimento (m diff) e lo scarto tipo delle differenze (st) sono rilevabili nelle tabelle che riportano i risultati analitici.

Per monitorare nel tempo i propri risultati ottenuti nei singoli Ring Test, si dovrebbe riportare la percentuale dell'ordinamento (terza colonna del riquadro di ogni analita) su una carta di controllo.

➤ Tabelle riportanti i risultati

Lo Z Score è calcolato mediante la seguente formula:

$$ZS = \frac{m - VAL \text{ RIF}}{st}$$

Dove: m = media dei risultati di analisi di ogni laboratorio

VAL RIF = valore di riferimento (mediana)

st = scarto tipo

Come riportato nella pubblicazione "The international harmonized protocol for the proficiency testing of (chemical) analytical laboratories (Pure & Appl. Chem. Vol. 65, n. 9 pp 2123 – 2144, 1993) è possibile la seguente classificazione:

$Z < 2$	Soddisfacente
$2 < Z < 3$	Dubbio
$Z > 3$	Insoddisfacente

In altri termini, i laboratori compresi tra 0 e 1 di ZS sono nella situazione auspicabile. Quelli compresi nella fascia tra 1 e 2 hanno una posizione soddisfacente. I laboratori compresi tra 2 e 3 sono nella fascia di allarme e quelli posti oltre il 3 sono "fuori controllo".

Sono stati calcolati i singoli ZS per ogni campione. La valutazione di cui sopra dovrebbe essere applicata per ogni singolo campione.

➤ **Grafico della dispersione dei risultati in base allo scarto tipo delle differenze (st diff) e differenza dalla media di riferimento (m diff).**

Sull'asse delle ordinate sono riportati gli scarti tipo delle differenze (st diff) e su quello delle ascisse sono riportate le differenze della media del laboratorio dal valore di riferimento (m diff).



Associazione Italiana Allevatori Laboratorio Standard Latte

LEGENDA

La pagina seguente riporta una tabella come esempio di elaborazione dei risultati di analisi di un Ring Test.

La comprensione della legenda risulterà agevolata se si consulerà contemporaneamente il testo e la tabella.

Poiché il numero dei laboratori è elevato, per ogni analisi possono essere presenti anche più fogli

1. Numero di identificazione del laboratorio che viene assegnato ad ogni Ring Test. La chiave identificativa viene comunicata via e-mail e deve essere riportata in calce all'elenco dei laboratori partecipanti.
2. Numero identificativo dei campioni. Sequenzialmente è riportata la prima e la seconda ripetizione di analisi.
3. Media delle due ripetizioni e media aritmetica di tutti i risultati di analisi.
4. Nel riquadro che è stampato in tutte le pagine, sono riportate: la media aritmetica (Media), il valore minimo (Min), quello massimo (Max), lo scarto tipo (ST) e il valore di riferimento (Val Rif). Quest'ultimo è rappresentato dalla mediana ed è considerato il valore "vero" a cui far riferimento per tutte le elaborazioni e confronti. Sia nel calcolo della media che nel calcolo della mediana non sono considerati i campioni outlier. Nell'ultima riga sono riportati i valori calcolati sulle medie dei laboratori.
5. I valori dei campioni outlier al test di Cochran e di Grubbs (vedi tabella Ripetibilità – Riproducibilità – Outlier specifica per ogni analita) sono stampati in grassetto.
6. Risultato mancante, sostituito con il corrispondente valore della mediana, al fine di poter calcolare lo Z Score della media dei risultati. Le cifre sono inserite in un riquadro.
7. Per memoria si ricorda la formula dello ZS: *risultato lab – valore di riferimento / scarto tipo dei risultati considerati*. In questa parte della tabella sono riportati i risultati del calcolo dello Z Score:

- calcolato per singolo campione (ZS CAMP);
- calcolato con la media del laboratorio meno la media del valore di riferimento (mediana) e lo scarto tipo (ST) delle medie di tutti i laboratori (ZS LAB);

8. In questa parte della tabella sono riportate:

- la differenza di ogni singolo campione dal valore di riferimento riportato nel riquadro (v. punto 4);
- la media aritmetica delle singole differenze (m diff);
- lo scarto tipo delle differenze (st diff)
- la distanza euclidiana (D) o distanza dagli assi ed è calcolata come radice quadrata della somma dei quadrati di m diff e st diff. Utilizzando il valore di "D" è possibile ottenere un ordinamento dei laboratori.

9. In questa parte della tabella sono riportati:

- lo slope o pendenza della retta (SLOPE);
- il bias o intercetta (BIAS);
- la correlazione (CORR).

Per il calcolo si utilizzano i risultati dei singoli laboratori e il Valore di Riferimento riportato nel riquadro (v. punto 4).

10. In questa parte della tabella sono riportati:

- lo slope o pendenza della retta (SLOPE);
- il bias o intercetta (BIAS);
- la correlazione (CORR).

Per il calcolo si utilizzano i risultati dei singoli laboratori e il Valore di Riferimento riportato nel riquadro (v. punto 4).



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI LABORATORIO STANDARD LATTE

Per l'organizzazione e l'elaborazione dei dati del RING TEST, il Laboratorio Standard Latte segue in modo conforme i requisiti previsti nei seguenti documenti o norme:

- ILAC - G13: 2007 (Guidelines for the requirements for the competence of providers of proficiency testing schemes);
- ISO 5725 – 2: 1994 – Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results – part 2;
- Pure & Appl. Chem. Vol. 65, n°9 pp.2123-2144, 1993 (The International harmonized protocol for the proficiency testing of analytical laboratories);
- FIL/IDF 135 B: 1991 (Precision characteristics of analytical methods- outline of collaborative study procedure;
- ISO/IEC 17043:2010 (Conformity assessment – General Requirements for proficiency testing)

Il Laboratorio Standard Latte dell'AIA ha il Sistema di Gestione per la Qualità certificato conforme alla Norma UNI EN ISO 9001-2008 dal CSQA con il seguente scopo: Progettazione, preparazione e commercializzazione di materiali di riferimento certificati nel settore lattiero-caseario. Progettazione, organizzazione e realizzazione di prove valutative interlaboratorio.

Il Responsabile del Laboratorio
(Dott.ssa Annunziata Fontana)



**Associazione Italiana Allevatori
Laboratorio Standard Latte**

ELENCO PARTECIPANTI RING TEST SPECIALISTICO CRIOSCOPIA DICEMBRE 2010

- 1 APA PISA
- 2 ARA ANCONA
- 3 ARA F.V.G. UDINE
- 4 ARA GENOVA
- 6 ARAL CREMA
- 8 CASEIFICIO BERGAMIN
- 9 CASEIFICIO DELL'AMIATA
- 10 CE DI BI REGGIO CALABRIA
- 11 CENTRALE LATTE DI TORINO
- 12 COOP.S.ANGIOLINA
- 13 ICQRF MINISTERO AGRICOLTURA SEZ. PERUGIA
- 14 IST.ZOOPROFILATTICO DI GROSSETO
- 15 IST.ZOOPROFILATTICO DI ORISTANO
- 16 IST.ZOOPROFILATTICO DI SALERNO
- 17 IST.ZOOPROFILATTICO DI SASSARI
- 18 LABORATORIO STANDARD LATTE
- 23 LABORATORIO VITA
- 19 LAT-BRI
- 20 MAURI
- 21 SALCHIM
- 22 STASI

LABORATORI PARTECIPANTI N.21 CON N.21 STRUMENTI

responsabile elaborazione: A. Carducci

Invio dei campioni	14 dicembre 2010
Data indicata per l'invio dei risultati	22 dicembre 2010
% dei risultati ricevuti nei limiti indicati	80%
Ultimi risultati ricevuti	31/12/2010
Invio delle elaborazioni statistiche	11/01/2011
Giorni impiegati tra l'invio dei campioni e l'elaborazione	28



**Associazione Italiana Allevatori
Laboratorio Standard Latte**

Via dell'industria 24, 00057 Maccarese (RM) email: dati.lsl@aia.it

RING TEST SPECIALISTICO CRIOSCOPIA DICEMBRE 2010

RIPETIBILITA' - RIPRODUCIBILITA' - OUTLIERS

Campione	Lab. Utili	Media	r	R	Sr	SR	RSDr	RSDR	RSDL	Lab. Out
latte 1	21	-0,5270	0,0030	0,0090	0,0010	0,0030	-0,1710	-0,5740	0,0000	
latte 2	21	-0,5460	0,0030	0,0090	0,0010	0,0030	-0,2210	-0,5840	0,0000	
1	20	-0,5990	0,0020	0,0040	0,0010	0,0010	-0,0950	-0,2490	0,0000	
2	19	-0,4080	0,0010	0,0050	0,0000	0,0020	-0,0690	-0,4560	0,0000	
3	21	-0,5120	0,0020	0,0050	0,0010	0,0020	-0,1100	-0,3600	0,0000	

MEDIE GENERALI

Media	r	R	Sr	SR	RSDr	RSDR	RSDL	r/R
-0,5180	0,0020	0,0070	0,0010	0,0020	-0,1330	-0,4450	0,0000	0,2900

LABORATORI OUTLIERS

OBS	CAMP	LAB	RIP1	RIP2	Test
1	3	14	-0,5930	-0,5930	Outlier per Test di Grubbs
2	4	12	-0,4080	-0,4130	Outlier per Test di Cochran
3	4	5	-0,4050	-0,4070	Outlier per Test di Cochran

LEGENDA

r	ripetibilita'
R	riproducibilita'
Sr	deviazione standard della ripetibilità
SR	deviazione standard della riproducibilità
RSDr	ripetibilità espressa in unità di media
RSDR	riproducibilità espressa in unità di media
RSDL	frazione di RSDR dovuta alla differenza fra i laboratori
OUT	outliers



**Associazione Italiana Allevatori
Laboratorio Standard Latte**

Via dell'industria 24, 00057 Maccarese (RM) email: dati.lsl@aia.it

RING TEST SPECIALISTICO CRIOSCOPIA dicembre 2010

ORDINAMENTO LABORATORI

SOLUZIONI			
ORD	LAB	D/m°C	%
1	8	0,000	4,8%
2	6	0,333	9,5%
3	15	0,333	14,3%
4	16	0,441	19,0%
5	21	0,441	23,8%
6	10	0,441	28,6%
7	11	0,707	33,3%
8	17	1,000	38,1%
9	1	1,054	42,9%
10	7	1,173	47,6%
11	3	1,269	52,4%
12	18	1,394	57,1%
13	13	1,500	61,9%
14	9	1,667	66,7%
15	20	1,667	71,4%
16	12	1,922	76,2%
17	2	2,646	81,0%
18	5	2,728	85,7%
19	4	2,848	90,5%
20	19	3,082	95,2%
21	14	5,434	100,0%

LATTE			
ORD	LAB	D/m°C	%
1	2	0,000	4,8%
2	10	0,000	9,5%
3	18	0,500	14,3%
4	9	0,866	19,0%
5	8	1,000	23,8%
6	20	1,000	28,6%
7	4	1,299	33,3%
8	16	1,785	38,1%
9	17	2,046	42,9%
10	3	2,121	47,6%
11	7	2,136	52,4%
12	15	2,449	57,1%
13	12	2,500	61,9%
14	21	3,082	66,7%
15	1	3,082	71,4%
16	5	3,082	76,2%
17	13	4,500	81,0%
18	6	5,000	85,7%
19	19	5,847	90,5%
20	14	6,062	95,2%
21	11	6,610	100,0%

LEGENDA:

ORD= ORDINAMENTO

D=DISTANZA EUCLIDIANA DALL'ORIGINE DEGLI ASS

$$\sqrt{(m \text{ diff})^2 + ds^2}$$

m diff = media lab - valore di riferimento
ds = deviazione standard delle differenze

I VALORI ALL'INTERNO DEL RIQUADRO SONO RELATIVI AI LABORATORI CHE HANNO ALMENO UN VALORE SOSTITUITO CON IL VALORE DI RIFERIMENTO
NON SONO RIPORTATI NEL RANKING I LABORATORI CHE SI DISCOSTANO PIU' DEL 30% DALL'ULTIMO LABORATORIO CLASSIFICATO



RING TEST SPECIALISTICO CRIOSCOPIA DEL 21 DICEMBRE 2010

SOLUZIONI

n/LAB	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	-0,6000	-0,5990	-0,5980	-0,5970	-0,5960	-0,6000	-0,6000	-0,6000	-0,5970	-0,6000	-0,6000	-0,6000	-0,6010	-0,5930	-0,6000	-0,5990	-0,5990	-0,5990	-0,6000	-0,5970	-0,5990
2	-0,4070	-0,4040	-0,4080	-0,4050	-0,4050	-0,4080	-0,4080	-0,4080	-0,4080	-0,4090	-0,4080	-0,4130	-0,4100	-0,4030	-0,4080	-0,4080	-0,4080	-0,4060	-0,4110	-0,4080	-0,4080
3	-0,5120	-0,5120	-0,5140	-0,5090	-0,5090	-0,5120	-0,5145	-0,5120	-0,5120	-0,5120	-0,5120	-0,5140	-0,5140	-0,5080	-0,5120	-0,5110	-0,5120	-0,5110	-0,5160	-0,5120	-0,5120
1	-0,6010	-0,5990	-0,5980	-0,5970	-0,5970	-0,6000	-0,6000	-0,5990	-0,5970	-0,6000	-0,6010	-0,6020	-0,6010	-0,5930	-0,6000	-0,5990	-0,5970	-0,5990	-0,6000	-0,5970	-0,6000
2	-0,4070	-0,4040	-0,4080	-0,4050	-0,4070	-0,4080	-0,4080	-0,4080	-0,4080	-0,4080	-0,4080	-0,4080	-0,4090	-0,4030	-0,4080	-0,4080	-0,4080	-0,4060	-0,4110	-0,4080	-0,4090
3	-0,5130	-0,5120	-0,5120	-0,5090	-0,5090	-0,5120	-0,5130	-0,5120	-0,5120	-0,5120	-0,5130	-0,5130	-0,5130	-0,5070	-0,5120	-0,5120	-0,5120	-0,5110	-0,5160	-0,5120	-0,5130

MEDIA DELLE RIPETIZIONI

n/LAB	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	media	min	max	ds	mediana
1	-0,6005	-0,5990	-0,5980	-0,5970	-0,5965	-0,6000	-0,6000	-0,5995	-0,5970	-0,6000	-0,6005	-0,6010	-0,6010	-0,5930	-0,6000	-0,5990	-0,5980	-0,5990	-0,6000	-0,5970	-0,5995	-0,5991	-0,6010	-0,5965	0,0014	-0,5995
2	-0,4070	-0,4040	-0,4080	-0,4050	-0,4060	-0,4080	-0,4080	-0,4080	-0,4080	-0,4085	-0,4080	-0,4105	-0,4095	-0,4030	-0,4080	-0,4080	-0,4080	-0,4060	-0,4110	-0,4080	-0,4085	-0,4075	-0,4110	-0,4030	0,0019	-0,4080
3	-0,5125	-0,5120	-0,5130	-0,5090	-0,5090	-0,5120	-0,5138	-0,5120	-0,5120	-0,5120	-0,5125	-0,5135	-0,5135	-0,5075	-0,5120	-0,5115	-0,5120	-0,5110	-0,5160	-0,5120	-0,5125	-0,5120	-0,5160	-0,5075	0,0018	-0,5120
4																										
5	-0,5067	-0,5050	-0,5063	-0,5037	-0,5038	-0,5067	-0,5073	-0,5065	-0,5057	-0,5068	-0,5070	-0,5083	-0,5080	-0,5012	-0,5067	-0,5062	-0,5060	-0,5053	-0,5090	-0,5057	-0,5068	-0,5064	-0,5090	-0,5037	0,0012	-0,5066
	0,0969	0,0977	0,0952	0,0961	0,0954	0,0961	0,0962	0,0959	0,0947	0,0959	0,0964	0,0954	0,0959	0,0952	0,0961	0,0956	0,0951	0,0966	0,0947	0,0947	0,0956					

MEDIA DS

Z SCORE CON IL VALORE DI RIFERIMENTO


n/LAB	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	-0,708	0,354	1,062	1,769	2,123	-0,354	-0,354	0,000	1,769	-0,354	-0,708	-1,062	-1,062	4,600	-0,354	0,354	1,062	0,354	-0,354	1,769	0,000
2	0,539	2,155	0,000	1,616	1,078	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,269	0,000	-1,347	-0,808	2,694	0,000	0,000	0,000	1,078	-1,616	0,000	-0,269
3	-0,278	0,000	-0,556	1,667	1,667	0,000	-0,972	0,000	0,000	0,000	-0,278	-0,833	-0,833	2,500	0,000	0,278	0,000	0,556	-2,222	0,000	-0,278
ZS LAB	-0,072	1,365	0,216	2,515	2,371	-0,072	-0,575	0,072	0,790	-0,216	-0,359	-1,509	-1,222	4,671	-0,072	0,359	0,503	1,078	-2,084	0,790	-0,216

DIFFERENZE CON IL VALORE DI RIFERIMENTO

n/LAB	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	-0,0010	0,0005	0,0015	0,0025	0,0030	-0,0005	-0,0005	0,0000	0,0025	-0,0005	-0,0010	-0,0015	-0,0015	0,0065	-0,0005	0,0005	0,0015	0,0005	-0,0005	0,0025	0,0000
2	0,0010	0,0040	0,0000	0,0030	0,0020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-0,0005	0,0000	-0,0025	-0,0015	0,0050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0020	-0,0030	0,0000	-0,0005
3	-0,0005	0,0000	-0,0010	0,0030	0,0030	0,0000	-0,0017	0,0000	0,0000	0,0000	-0,0005	-0,0015	-0,0015	0,0045	0,0000	0,0005	0,0000	0,0010	-0,0040	0,0000	-0,0005
M	-0,0002	0,0015	0,0002	0,0028	0,0027	-0,0002	-0,0007	0,0000	0,0008	-0,0003	-0,0005	-0,0018	-0,0015	0,0053	-0,0002	0,0003	0,0005	0,0012	-0,0025	0,0008	-0,0003
DS	0,0010	0,0022	0,0013	0,0003	0,0006	0,0003	0,0009	0,0000	0,0014	0,0003	0,0005	0,0006	0,0000	0,0010	0,0003	0,0003	0,0009	0,0008	0,0018	0,0014	0,0003
D*1000	1,0541	2,6458	1,2693	2,8480	2,7285	0,3333	1,1726	0,0000	1,6667	0,4410	0,7071	1,9221	1,5000	5,4339	0,3333	0,4410	1,0000	1,3944	3,0822	1,6667	0,4410
slope	1,0106	1,0189	0,9927	1,0025	0,9946	1,0025	1,0031	1,0000	0,9874	0,9999	1,0052	0,9946	1,0000	0,9926	1,0025	0,9973	0,9924	1,0079	0,9877	0,9874	0,9975
bias	0,0052	0,0111	-0,0035	0,0041	0,0000	0,0011	0,0008	0,0000	-0,0056	-0,0004	0,0021	-0,0045	-0,0015	0,0016	0,0011	-0,0010	-0,0033	0,0052	-0,0088	-0,0056	-0,0016
corr.	1,0000	0,9999	0,9999	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999	1,0000	1,0000




RING TEST SPECIALISTICO CRIOSCOPIA DICEMBRE 2010 Z SCORE SOLUZIONI

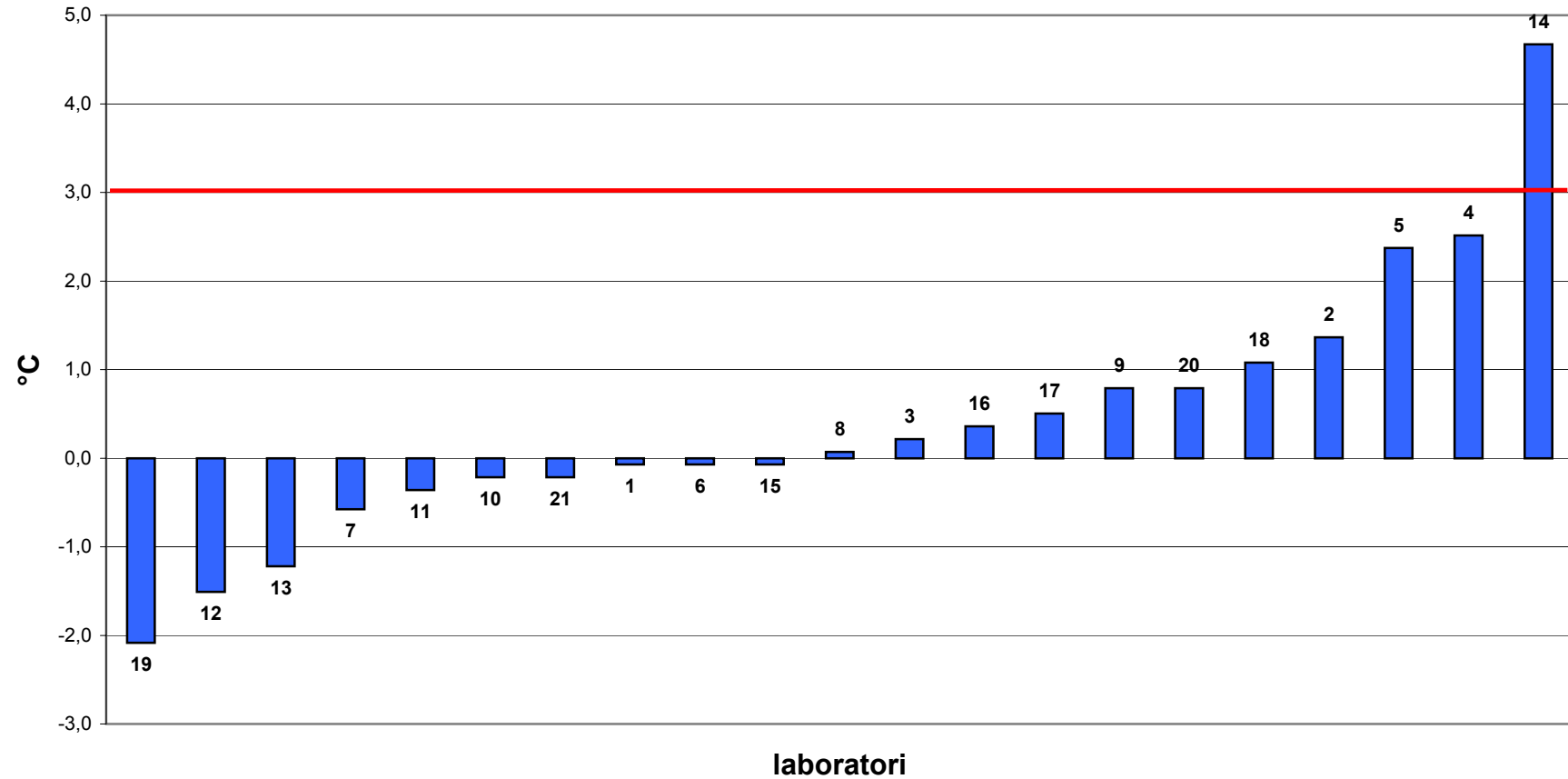



RING TEST SPECIALISTICO CRIOSCOPIA SOLUZIONI DICEMBRE 2010


MEDIA DELLE DIFFERENZE DAL VALORE DI RIFERIMENTO E SCARTO TIPO DELLE DIFFERENZE

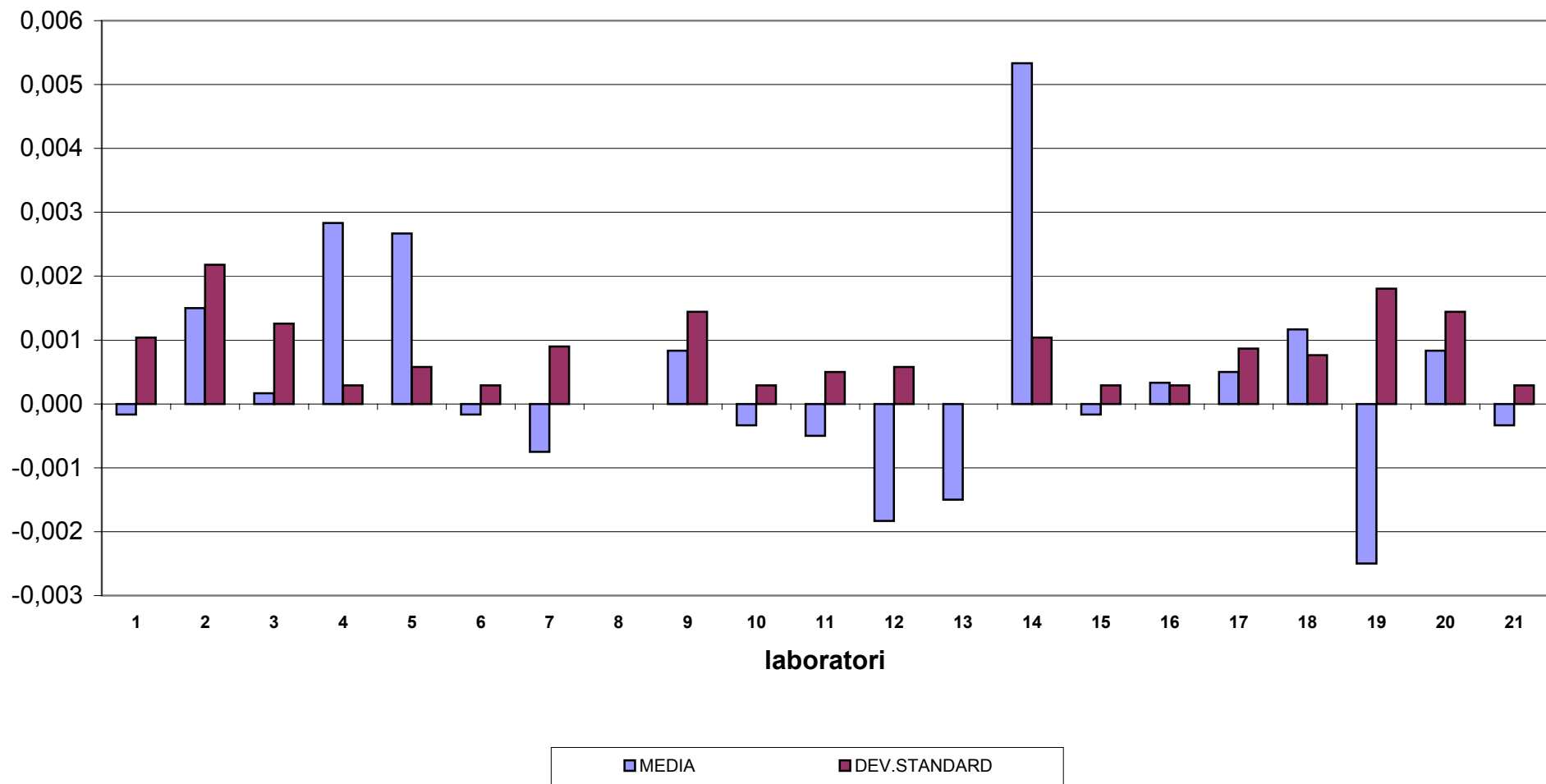



RING TEST SPECIALISTICO CRIOSCOPIA DICEMBRE 2010

DISPERSIONE DEI VALORI CONFRONTO TRA LATTE E SOLUZIONI

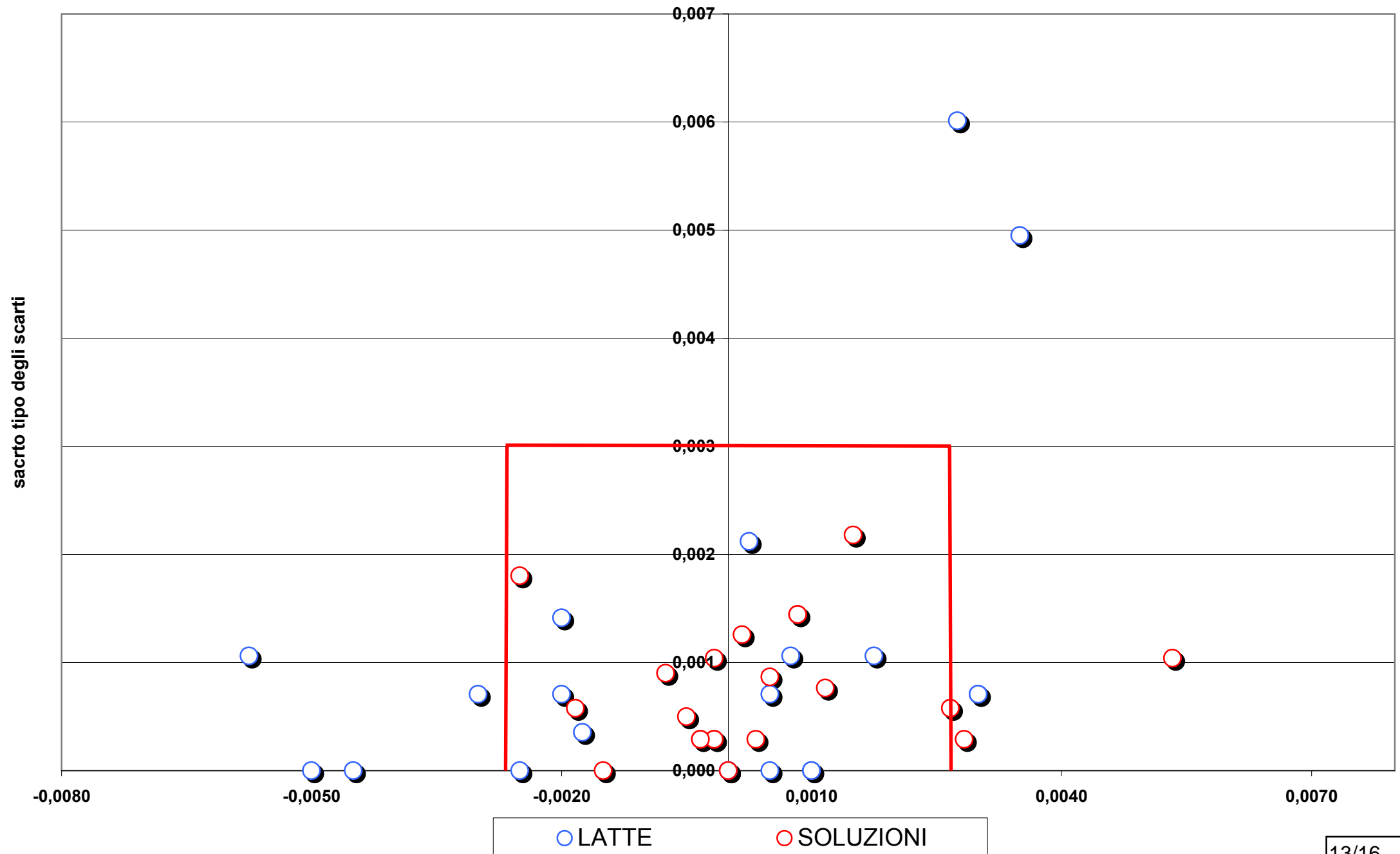



RING TEST SPECIALISTICO CRIOSCOPIA DICEMBRE 2010

CAMPIONI LATTE

n/LAB	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	-0,5300	-0,5260	-0,5280	-0,5270	-0,5250	-0,5320	-0,5270	-0,5260	-0,5280	-0,5270	-0,5210	-0,5300	-0,5310	-0,5260	-0,5280	-0,5290	-0,5270	-0,5260	-0,5340	-0,5260	-0,5230
2	-0,5510	-0,5460	-0,5480	-0,5440	-0,5450	-0,5510	-0,5435	-0,5450	-0,5440	-0,5470	-0,5480	-0,5480	-0,5500	-0,5380	-0,5490	-0,5480	-0,5430	-0,5450	-0,5500	-0,5450	-0,5440
1	-0,5290	-0,5280	-0,5290	-0,5270	-0,5240	-0,5320	-0,5295	-0,5260	-0,5260	-0,5270	-0,5190	-0,5290	-0,5320	-0,5280	-0,5280	-0,5290	-0,5250	-0,5270	-0,5330	-0,5260	-0,5240
2	-0,5480	-0,5460	-0,5490	-0,5450	-0,5400	-0,5510	-0,5450	-0,5450	-0,5460	-0,5450	-0,5470	-0,5490	-0,5510	-0,5400	-0,5490	-0,5470	-0,5440	-0,5460	-0,5520	-0,5450	-0,5430

MEDIA DELLE RIPETIZIONI

n/LAB	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	media	min	max	ds	mediana
1	-0,5295	-0,5270	-0,5285	-0,5270	-0,5245	-0,5320	-0,5283	-0,5260	-0,5270	-0,5270	-0,5200	-0,5295	-0,5315	-0,5270	-0,5280	-0,5290	-0,5260	-0,5265	-0,5335	-0,5260	-0,5235	-0,5275	-0,5335	-0,5200	0,0030	-0,5270
2	-0,5495	-0,5460	-0,5485	-0,5445	-0,5425	-0,5510	-0,5443	-0,5450	-0,5450	-0,5460	-0,5475	-0,5485	-0,5505	-0,5390	-0,5490	-0,5475	-0,5435	-0,5455	-0,5510	-0,5450	-0,5435	-0,5463	-0,5510	-0,5390	0,0031	-0,5460
MEDIA	-0,5395	-0,5365	-0,5385	-0,5358	-0,5335	-0,5415	-0,5363	-0,5355	-0,5360	-0,5365	-0,5338	-0,5390	-0,5410	-0,5330	-0,5385	-0,5383	-0,5348	-0,5360	-0,5423	-0,5355	-0,5335	-0,5369	-0,5423	-0,5330	0,0027	-0,5363
DS	0,0141	0,0134	0,0141	0,0124	0,0127	0,0134	0,0113	0,0134	0,0127	0,0134	0,0194	0,0134	0,0134	0,0085	0,0148	0,0131	0,0124	0,0134	0,0124	0,0134	0,0141					

Z SCORE CON IL VALORE DI RIFERIMENTO

n/LAB	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	-0,846	0,000	-0,508	0,000	0,846	-1,692	-0,423	0,338	0,000	0,000	2,369	-0,846	-1,523	0,000	-0,338	-0,677	0,338	0,169	-2,200	0,338	1,185
2	-1,140	0,000	-0,814	0,488	1,140	-1,628	0,570	0,326	0,326	0,000	-0,488	-0,814	-1,465	2,279	-0,977	-0,488	0,814	0,163	-1,628	0,326	0,814
ZS LAB	-1,206	-0,093	-0,835	0,186	1,021	-1,949	0,000	0,278	0,093	-0,093	0,928	-1,021	-1,763	1,206	-0,835	-0,742	0,557	0,093	-2,227	0,278	1,021


DIFFERENZE CON IL VALORE DI RIFERIMENTO

n/LAB	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	-0,003	0,000	-0,001	0,000	0,003	-0,005	-0,001	0,001	0,000	0,000	0,007	-0,003	-0,005	0,000	-0,001	-0,002	0,001	0,001	-0,007	0,001	0,003
2	-0,004	0,000	-0,002	0,002	0,004	-0,005	0,002	0,001	0,001	0,000	-0,002	-0,002	-0,004	0,007	-0,003	-0,002	0,002	0,000	-0,005	0,001	0,002
media	-0,003	0,000	-0,002	0,001	0,003	-0,005	0,000	0,001	0,001	0,000	0,003	-0,003	-0,005	0,004	-0,002	-0,002	0,002	0,001	-0,006	0,001	0,003
ds	0,001	0,000	0,001	0,001	0,001	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000	0,006	0,000	0,000	0,005	0,001	0,000	0,001	0,000	0,001	0,000	0,001
D*1000	3,082	0,000	2,121	1,299	3,082	5,000	2,136	1,000	0,866	0,000	6,610	2,500	4,500	6,062	2,449	1,785	2,046	0,500	5,847	1,000	3,082
slope	1,053	1,000	1,053	0,921	0,947	1,000	0,842	1,000	0,947	1,000	1,447	1,000	1,000	0,632	1,105	0,974	0,921	1,000	0,921	1,000	1,053
bias	0,025	0,000	0,026	-0,042	-0,025	-0,005	-0,084	0,001	-0,028	0,000	0,243	-0,003	-0,005	-0,194	0,054	-0,016	-0,041	0,000	-0,048	0,001	0,031
corr.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000



RING TEST SPECIALISTICO CRIOSCOPIA DICEMBRE 2010

Z SCORE LATTE

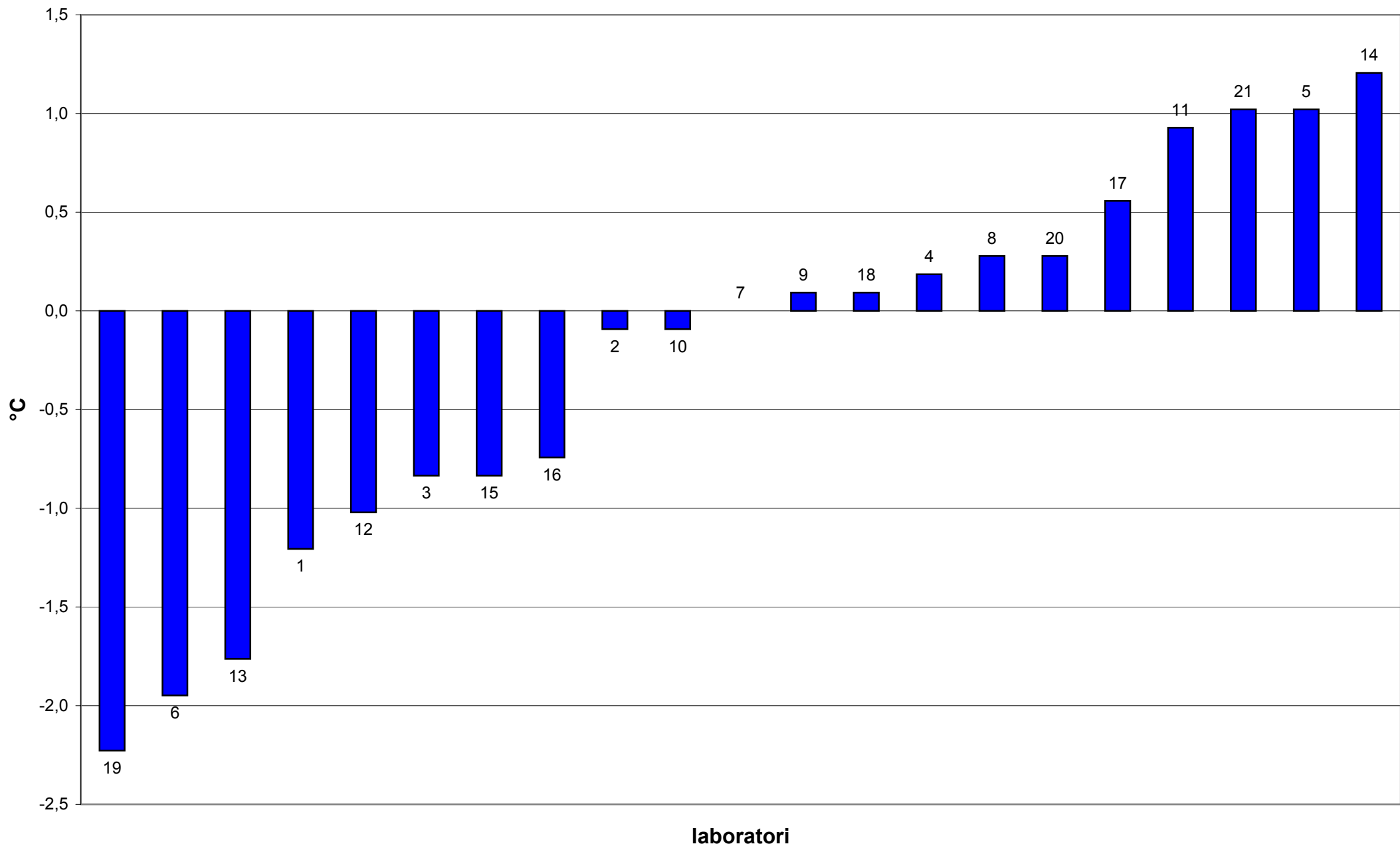



RING TEST SPECIALISTICO CRIOSCOPIA LATTE DICEMBRE 2010
MEDIA DELLE DIFFERENZE DAL VALORE DI RIFERIMENTO E SCARTO TIPO DELLE DIFFERENZE

