



**Associazione Italiana Allevatori
Laboratorio Standard Latte**

PROGRAMMA

Dati **A**nalisi **M**etodi **O**rganizzazione **C**onfronti **L**aboratori **E**sperti

RING TEST CELLULE SOMATICHE LUGLIO 2009

VIA DELL'INDUSTRIA 24 - 00057 MACCARESE ROMA
Tel. 06 6678830 Fax. 06 6678811 e-mail ls1@aia.it



**ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
LABORATORIO STANDARD LATTE**

**ELENCO ALFABETICO DEI LABORATORI PARTECIPANTI
RING TEST CELLULE SOMATICHE LUGLIO 2009
LATTE VACCINO**

AGROSCOPE SUISSE
ARA ABRUZZO
ARA CAMPANIA
ARA EMILIA ROMAGNA
ARA FRIULI RIVOLTO DI CODROIPO (UD)
ARA LAZIO MACCARESE
ARA LIGURIA
ARA LOMBARDIA CREMA (CR)
ARA MARCHE
ARA PIEMONTE
ARA PUGLIA
ARA SARDEGNA NURAXINIEDDU (OR)
ARA VENETO PADOVA
ASSOCIAZ.PROV.ALLEVATORI CAMPOBASSO
ASSOCIAZ.PROV.ALLEVATORI CORCIANO PERUGIA
ASSOCIAZ.PROV.ALLEVATORI COSENZA
ASSOCIAZ.PROV.ALLEVATORI MATERA
ASSOCIAZ.PROV.ALLEVATORI PISA
ASSOCIAZ.PROV.ALLEVATORI POTENZA
ASSOCIAZ.PROV.ALLEVATORI REGGIO CALABRIA
ASSOCIAZ.PROV.ALLEVATORI SALICETA S.GIULIANO (MO)
BIOLAB NOVARA
BIOLAB SORAGNA
BIRAGHI
CASEIFICIO MANCIANO MANCIANO (GR)
CENTRALE LATTE FIRENZE
CENTRALE LATTE TORINO
CHELAB
CONS.AGR.INTERPR.MILANO
COOP SANTANGIOLINA
EUROQUALITY GIOIA DEL COLLE (BA)

FEDERAZ.LATTERIE SOCIALI BOLZANO
 FEDERAZ.PROOV.ALLEVATORI TRENTO
 IST. ZOOPROF. SPERIM. PALERMO
 IST. ZOOPROF. SPERIM. PERUGIA
 IST. ZOOPROF. SPERIM. POTENZA
 IST. ZOOPROF. SPERIM. PUTIGNANO
 IST.ZOOPROFIL.SPERIM. ROMA
 IST.ZOOPROFIL.SPERIM. SALERNO
 IST.ZOOPROFIL.SPERIMEN. GROSSETO
 IZS DELLA SARDEGNA SASSARI
 IZS SARDEGNA DIPART.OR ORISTANO
 LAB.SERV.PROD-ANIM.LATTE AOSTA
 LAB.PASTEUR
 LABORAT.STANDARD LATTE MACCARESE
 SALCHIM
 TECNO-CASEARIA TAVERNELLE DI SOVIZZO(VI)
 UNIVERSITA' MILANO MALATT.INFETTIVE
 VENETO AGRICOLTURA THIENE

TOTALE PARTECIPANTI
 N.49 LABORATORI
 N.66 STRUMENTI

VS. CODICE.....

Invio dei campioni	8 luglio 2009
Data indicata per l'invio dei risultati	16 luglio 2009
% dei risultati ricevuti nei limiti indicati	80%
Ultimi risultati ricevuti	3 agosto 2009
Invio delle elaborazioni statistiche	10 agosto 2009
Giorni impiegati tra l'invio dei campioni e l'elaborazione	31



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI LABORATORIO STANDARD LATTE

Per l'organizzazione e l'elaborazione dei dati del RING TEST, il Laboratorio Standard Latte segue in modo conforme i requisiti previsti nei seguenti documenti o norme:

- ILAC - G13: 2007 (Guidelines for the requirements for the competence of providers of proficiency testing schemes);
- ISO 5725 – 2: 1994 – Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results – part 2;
- Pure & Appl. Chem. Vol. 65, n°9 pp.2123-2144, 1993 (The International harmonized protocol for the proficiency testing of analytical laboratories);
- FIL/IDF 135 B: 1991 (Precision characteristics of analytical methods- outline of collaborative study procedure;
- ISO-IEC Guide 43-1 del 1997 (Proficiency testing by interlaboratory comparisons – Part 1: Development and operation of Proficiency testing schemes).

Il Laboratorio Standard Latte dell'AIA ha il Sistema di Gestione per la Qualità certificato conforme alla Norma UNI EN ISO 9001-2008 dalla CSQA con il seguente scopo: Progettazione, preparazione e commercializzazione di materiali di riferimento certificati nel settore lattiero-caseario. Progettazione, organizzazione e realizzazione di prove valutative interlaboratorio.

Il Responsabile del Laboratorio
(Dott.ssa Annunziata Fontana)



Associazione Italiana Allevatori Laboratorio Standard Latte

VALUTAZIONE DEL RING TEST

Nella descrizione della valutazione del Ring Test sarà seguita l'impaginazione del documento. L'argomento trattato sarà indicato dal nome o riferimento alla tabella.

➤ Ordinamento laboratori

Nella tabella è riportato l'ordinamento dei laboratori ottenuto dal calcolo della distanza euclidiana secondo la seguente formula:

$$D = \sqrt{(m \text{ diff})^2 + st^2}$$

Dove:

D = distanza euclidiana dall'origine degli assi ;

m diff = differenza tra la media dei risultati del laboratorio ed il valore di riferimento;

ds = scarto tipo delle differenze tra i singoli risultati del laboratorio e i singoli valori di riferimento.

La differenza dal valore di riferimento (m diff) e lo scarto tipo delle differenze (ST) sono rilevabili nelle tabelle che riportano i risultati analitici.

Per monitorare nel tempo i propri risultati ottenuti nei singoli Ring Test, si dovrebbe riportare la percentuale dell'ordinamento (terza colonna del riquadro di ogni analita) su una carta di controllo.

➤ Tabelle riportanti i risultati

Lo Z Score è calcolato mediante la seguente formula:

$$ZS = \frac{m - VAL \text{ RIF}}{st}$$

Dove: m = media dei risultati di analisi di ogni laboratorio

VAL RIF = valore di riferimento (mediana)

ds = scarto tipo dalle medie

Come riportato nella pubblicazione "The international harmonized protocol for the proficiency testing of (chemical) analytical laboratories (Pure & Appl. Chem. Vol. 65, n. 9 pp 2123 – 2144, 1993) è possibile la seguente classificazione:

$Z < 2$	Soddisfacente
$2 < Z < 3$	Dubbio
$Z > 3$	Insoddisfacente

In altri termini, i laboratori compresi tra 0 e 1 di ZS sono nella situazione auspicabile. Quelli compresi nella fascia tra 1 e 2 hanno una posizione soddisfacente. I laboratori compresi tra 2 e 3 sono nella fascia di allarme e quelli posti oltre il 3 sono "fuori controllo".

Sono stati calcolati i singoli ZS per ogni campione. La valutazione di cui sopra dovrebbe essere applicata per ogni singolo campione.

E' riportato, inoltre, il valore dello ZS con al denominatore lo ST fisso (target annuale). Ciò consente di confrontare nel tempo le prestazioni dei singoli laboratori. I valori di scarto tipo "fisso" (ST fisso), stabiliti in base alle analisi eseguite, per l'anno in corso sono i seguenti:

- contenuto in cellule somatiche 30

E' consigliabile riportare su carte di controllo i valori di ZS con st fisso del proprio laboratorio per poterli confrontare con i ring test successivi.

➤ **Grafico della dispersione dei risultati in base allo scarto tipo delle differenze (st diff) e differenza della media dal valore di riferimento (m diff).**

Sull'asse delle ordinate sono riportati gli scarti tipo delle differenze (st diff) e su quello delle ascisse sono riportate le differenze della media del laboratorio dal valore di riferimento (m diff).

Per valutare la dispersione dei risultati, è stato disegnato un "box" utilizzando i valori della "ds diff" e della "m diff" utilizzati come target per l'anno 2007 .



Associazione Italiana Allevatori Laboratorio Standard Latte

LEGENDA

La pagina seguente riporta una tabella come esempio di elaborazione dei risultati di analisi di un Ring Test.

La comprensione della legenda risulterà agevolata se si consulterà contemporaneamente il testo e la tabella.

Poiché il numero dei laboratori è elevato, per ogni analisi possono essere presenti anche più fogli

1. Numero di identificazione del laboratorio che viene assegnato ad ogni Ring Test. La chiave identificativa viene comunicata via e-mail e deve essere riportata in calce all'elenco dei laboratori partecipanti.
2. Numero identificativo dei campioni. Sequenzialmente è riportata la prima e la seconda ripetizione di analisi. In alcune elaborazioni, es. contenuto del grasso, per motivi di spazio è riportata solo la media dei due risultati.
3. Media delle due ripetizioni e media aritmetica di tutti i risultati di analisi.
4. Nel riquadro che è stampato in tutte le pagine, sono riportate: la media aritmetica (Media), il valore minimo (Min), quello massimo (Max), lo scarto tipo (ST) e il valore di riferimento (Val Rif). Quest'ultimo è rappresentato dalla mediana ed è considerato il valore "vero" a cui far riferimento per tutte le elaborazioni e confronti. Sia nel calcolo della media che nel calcolo della mediana non sono considerati i campioni outlier. Nell'ultima riga sono riportati i valori calcolati sulle medie dei laboratori.
5. I valori dei campioni outlier al test di Cochran e di Grubbs (vedi tabella Ripetibilità – Riproducibilità – Outlier specifica per ogni analita) sono stampati in grassetto.
6. Risultato mancante, sostituito con il corrispondente valore della mediana, al fine di poter calcolare lo Z Score della media dei risultati. Le cifre sono inserite in un riquadro.
- 7.

8. Per memoria si ricorda la formula dello ZS: *risultato lab – valore di riferimento / scarto tipo dei risultati considerati*. In questa parte della tabella sono riportati i risultati del calcolo dello Z Score:
- calcolato per singolo campione (ZS CAMP);
 - calcolato con la media del laboratorio meno la media del valore di riferimento (mediana) e lo scarto tipo (ST) delle medie di tutti i laboratori (ZS LAB);
 - calcolato utilizzando uno scarto tipo (ST fisso) uguale per tutti i ring test. Standardizzando lo ST è possibile confrontare nel tempo le “performance” ottenute.
9. In questa parte della tabella sono riportate:
- la differenza di ogni singolo campione dal valore di riferimento riportato nel riquadro (v. punto 4);
 - la media aritmetica delle singole differenze (m diff);
 - lo scarto tipo delle differenze (st diff)
 - la distanza euclidiana (D) o distanza dagli assi ed è calcolata come radice quadrata della somma dei quadrati di m diff e st diff. Utilizzando il valore di “D” è possibile ottenere un ordinamento dei laboratori.
10. In questa parte della tabella sono riportati:
- lo slope o pendenza della retta (SLOPE);
 - il bias o intercetta (BIAS);
 - la correlazione (CORR).
- Per il calcolo si utilizzano i risultati dei singoli laboratori e il Valore di Riferimento riportato nel riquadro (v. punto 4).
11. In questa parte della tabella sono riportati:
- lo slope o pendenza della retta (SLOPE);
 - il bias o intercetta (BIAS);
 - la correlazione (CORR).
- Per il calcolo si utilizzano i risultati dei singoli laboratori e il Valore di Riferimento riportato nel riquadro (v. punto 4).

TEST DI OMOGENEITA' DEI CAMPIONI

8 LUGLIO 2009

Sono state analizzate in doppio 20 provette per ogni campione con strumento fluoroptoelettronico

Campione	Media	Sd	n	$\sum W_i^2$	S _r	S _r %	S _d ²	S _e	S _e %
1	577	6,73	20	3546	9,41	1,63	45,28	0,97	0,17
2	158	4,52	14	751	5,18	3,28	20,45	2,65	1,68
3	972	9,16	19	2958	8,82	0,91	83,83	6,70	0,69
4	378	6,67	18	2083	7,61	2,01	44,51	3,95	1,04
5	333	6,01	19	1304	5,86	1,76	36,10	4,35	1,30
6	1229	11,85	10	5386	16,41	1,33	140,33	2,40	0,20
7	357	6,41	18	1019	5,32	1,49	41,08	5,19	1,46
8	726	8,13	16	1924	7,75	1,07	66,06	6,00	0,83
9	726	8,92	19	3043	8,95	1,23	79,56	6,29	0,87

Media: media delle provette

Sd: scarto tipo della serie

n: numero di provette analizzate

$\sum W_i^2$: somma delle differenze fra le ripetizioni

S_r: scarto tipo della ripetibilità


S_e: scarto tipo del campione



RING TEST DI

CONTENUTO IN

1	1	2,39	2,53	2,58	2,55	2,50	2,54	2,45	2,45	2,50	2,56	2,56	2,56	2,52
	2	3,79	3,97	3,98	3,93	3,84	3,97	3,94	3,94	3,91	3,99	3,99	3,99	3,98
	3	3,56	3,51	3,53	3,42	3,44	3,54	3,40	3,40	3,49	3,58	3,58	3,58	3,56
	4	3,44	3,53	3,48	3,38	3,43	3,49	3,36	3,36	3,46	3,53	3,53	3,53	3,51
2	1	2,38	2,55	2,57	2,56	2,50	2,55	2,42	2,42	2,49	2,52	2,52	2,52	2,52
	2	3,78	4,00	3,97	3,90	3,84	3,98	3,85	3,85	3,91	4,02	4,02	4,02	3,95
	3	3,55	3,53	3,51	3,42	3,45	3,54	3,37	3,37	3,49	3,55	3,55	3,55	3,55
	4	3,43	3,50	3,50	3,39	3,43	3,50	3,30	3,30	3,46	3,52	3,52	3,52	3,51

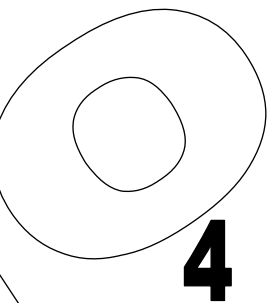

MEDIA DELLE DUE RIPETIZIONI

3	1	2,385	2,540	2,575	2,555	2,500	2,545	2,435	2,435	2,540	2,540	2,540	2,540	2,520
	2	3,785	3,985	3,975	3,915	3,840	3,975	3,895	3,895	3,910	4,005	4,005	4,005	3,965
	3	3,555	3,520	3,520	3,420	3,445	3,540	3,385	3,385	3,490	3,565	3,565	3,565	3,555
	4	3,435	3,515	3,490	3,385	3,430	3,495	3,330	3,330	3,460	3,525	3,525	3,525	3,510
m lab		3,290	3,390	3,390	3,319	3,304	3,389	3,261	3,261	3,350	3,409	3,409	3,409	3,388

MEDIA	MIN	MAX	ST	VAL RIF
2,512	2,385	2,575	0,057	2,540
3,935	3,785	4,005	0,069	3,965
3,501	3,385	3,565	0,069	3,520
3,458	3,330	3,525	0,071	3,490
3,351	3,261	3,409	0,057	3,388

Z SCORE CALCOLATO CON VALORE DI RIFERIMENTO

7	ZS CAMP,1	-2,718	0,000	0,614	0,263	-0,701	0,088	-1,841	-1,841	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,351
	ZS CAMP,2	-2,611	0,290	0,145	-0,725	-1,813	0,145	-1,015	-1,015	-0,798	0,580	0,580	0,580	0,000
	ZS CAMP,3	0,507	0,000	0,000	-1,450	-1,087	0,290	-1,957	-1,957	-0,435	0,652	0,652	0,652	0,507
	ZS CAMP,4	-0,770	0,350	0,000	-1,470	-0,840	0,070	-2,240	-2,240	-0,420	0,490	0,490	0,490	0,280
	ZS LAB	-1,712	0,044	0,044	-1,207	-1,471	0,022	-2,217	-2,217	-0,659	0,373	0,373	0,373	0,000

DIFFERENZE DAL VALORE DI RIFERIMENTO CALCOLATO

8	1	-0,155	0,000	0,035	0,015	-0,040	0,005	-0,105	-0,105	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,020
	2	-0,180	0,020	0,010	-0,050	-0,125	0,010	-0,070	-0,070	-0,055	0,040	0,040	0,040	0,000
	3	0,035	0,000	0,000	-0,100	-0,075	0,020	-0,135	-0,135	-0,030	0,045	0,045	0,045	0,035
	4	-0,055	0,025	0,000	-0,105	-0,060	0,005	-0,160	-0,160	-0,030	0,035	0,035	0,035	0,020
m diff		-0,089	0,011	0,011	-0,060	-0,075	0,010	-0,118	-0,118	-0,029	0,030	0,030	0,030	0,009
st diff		0,099	0,013	0,017	0,056	0,036	0,007	0,039	0,039	0,022	0,020	0,020	0,020	0,024
D		0,133	0,017	0,020	0,082	0,083	0,012	0,124	0,124	0,037	0,036	0,036	0,036	0,025

9	SLOPE	0,955	0,986	1,022	1,061	1,055	0,995	0,987	0,987	1,038	0,970	0,970	0,970	0,977
	BIAS	0,238	0,035	-0,086	-0,143	-0,106	0,006	0,161	0,161	-0,099	0,074	0,074	0,074	0,068
	CORREL.	0,988	1,000	1,000	0,997	1,000	1,000	0,998	0,998	1,000	1,000	1,000	1,000	0,999



**ORDINAMENTO LABORATORI
RING TEST CELLULE SOMATICHE LUGLIO 2009
LATTE VACCINO**

ORD	LAB	D	%	ORD	LAB	D	%
1	34	6,68	2%	34	46	27,39	52%
2	54	9,42	3%	35	8	27,91	53%
3	60	11,18	5%	36	3	28,56	55%
4	33	14,65	6%	37	22	28,85	56%
5	38	16,00	8%	38	37	29,18	58%
6	13	16,43	9%	39	21	31,04	59%
7	64	16,557	11%	40	36	31,08	61%
8	9	16,68	12%	41	39	32,64	62%
9	59	16,73	14%	42	52	32,94	64%
10	12	17,53	15%	43	23	34,87	65%
11	44	17,69	17%	44	43	36,44	67%
12	11	17,88	18%	45	2	36,99	68%
13	7	18,42	20%	46	28	39,19	70%
14	42	18,71	21%	47	65	39,94	71%
15	50	18,78	23%	48	19	40,19	73%
16	31	19,63	24%	49	24	40,21	74%
17	35	19,65	26%	50	6	41,55	76%
18	49	19,76	27%	51	17	43,14	77%
19	10	19,79	29%	52	55	51,06	79%
20	16	20,41	30%	53	51	51,10	80%
21	30	20,70	32%	54	5	51,48	82%
22	53	20,88	33%	55	47	57,47	83%
23	45	20,90	35%	56	26	58,32	85%
24	4	23,46	36%	57	58	59,26	86%
25	32	24,61	38%	58	63	63,14	88%
26	48	24,81	39%	59	66	66,12	89%
27	29	24,89	41%	60	25	69,39	91%
28	18	25,01	42%	61	61	79,12	92%
29	15	25,20	44%	62	57	80,00	94%
30	56	26,16	45%	63	20	134,58	95%
31	41	27,01	47%	64	1	141,02	97%
32	27	27,09	48%	65	62	167,09	98%
33	14	27,31	50%	66	40	186,81	100%

LEGENDA: ORD = ordinamento; D = distanza euclidiana dall'origine degli assi.

$$D = \sqrt{(m \text{ diff})^2 + st^2} \quad \text{dove } m \text{ diff} = m \text{ lab} - \text{valore di riferimento};$$

st = scarto tipo delle differenze

I VALORI ALL'INTERNO DEL RIQUADRO SONO RELATIVI A LABORATORI CHE HANNO ALMENO UN VALORE SOSTITUITO CON IL VALORE DI RIFERIMENTO



RING TEST LUGLIO 2009

CONTENUTO IN CELLULE SOMATICHE (1000/ml)
LATTE VACCINO

Table with 22 columns (N, 1-22) and 22 rows of numerical data representing somatic cell counts.

MEDIA DELLE DUE RIPETIZIONI

Table with 22 columns (1-22) and 22 rows of numerical data representing the average of two repetitions.

Summary table with 5 columns: MEDIA, MIN, MAX, ST, VAL RIF. It provides statistical values for the data.

Z SCORE CALCOLATO CON IL VALORE DI RIFERIMENTO

Table with 22 columns (ZS CAMP.1-9, ZS lab, ZS ST fisso) and 22 rows of Z-score values.

DIFFERENZE DAL VALORE DI RIFERIMENTO

Table with 22 columns (1-22, m diff, st diff, D, SLOPE, BIAS, CORREL.) and 22 rows of difference values.



RING TEST LUGLIO 2009

CONTENUTO IN CELLULE SOMATICHE (1000/ml) LATTE VACCINO

Table with 23 columns (N=23 to 44) and 9 rows of data representing somatic cell counts.

MEDIA DELLE DUE RIPETIZIONI

Table with 23 columns (m lab) and 9 rows of data representing the average of two repetitions.

Summary table with columns: MEDIA, MIN, MAX, ST, VAL RIF. Values: 479, 347, 543, 41.94, 494.

Z SCORE CALCOLATO CON IL VALORE DI RIFERIMENTO

Table with 23 columns (ZS CAMP.1 to ZS CAMP.9, ZS lab, ZS ST fisso) and 9 rows of Z-score data.

DIFFERENZE DAL VALORE DI RIFERIMENTO

Table with 23 columns (m diff, st diff, D, SLOPE, BIAS, CORREL.) and 9 rows of difference data.



RING TEST LUGLIO 2009

CONTENUTO IN CELLULE SOMATICHE (1000/ml)
LATTE VACCINO

Table with 28 columns (N, 45-66) and 9 rows of data representing somatic cell counts.

MEDIA DELLE DUE RIPETIZIONI

Table with 28 columns (1-28) and 9 rows of data representing the median of two repetitions.

Summary table with columns: MEDIA, MIN, MAX, ST, VAL RIF. It provides statistical values for the data.

Z SCORE CALCOLATO CON IL VALORE DI RIFERIMENTO

Table with 28 columns (ZS CAMP.1-9, ZS lab, ZS ST fisso) and 9 rows of data representing Z-scores.

DIFFERENZE DAL VALORE DI RIFERIMENTO

Table with 28 columns (1-28) and 9 rows of data representing differences from the reference value.



RING TEST CELLULE SOMATICHE LUGLIO 2009

RIPETIBILITA' - RIPRODUCIBILITA' - OUTLIERS

Campione	Lab. Utili	Media	r	R	Sr	SR	RSDr	RSDR	RSDL	Lab. Out
1	66	479	43,23	122,56	15,28	43,31	3,19	9,04	8,46	
2	63	130	14,79	26,91	5,23	9,51	4,02	7,32	6,11	!
3	63	865	54,15	121,20	19,14	42,83	2,21	4,95	4,43	!
4	60	347	27,98	58,46	9,89	20,66	2,85	5,95	5,23	!
5	65	309	27,56	51,91	9,74	18,34	3,15	5,94	5,03	!
6	62	1079	81,98	140,24	28,97	49,56	2,69	4,59	3,73	!
7	62	337	29,03	80,40	10,26	28,41	3,04	8,42	7,86	
8	65	665	45,60	103,61	16,11	36,61	2,42	5,50	4,94	!
9	62	650	45,80	116,86	16,18	41,29	2,49	6,35	5,84	!

LABORATORI OUTLIERS


OBS	CAMP	LAB	RIP1	RIP2	Test
1	2	1	84	85	Outlier per Test di Grubbs
2	2	61	161	180	Outlier per Test di Grubbs
3	2	46	161	171	Outlier per Test di Grubbs
4	3	61	701	917	Outlier per Test di Cochran
5	3	1	655	659	Outlier per Test di Grubbs
6	3	62	1038	1100	Outlier per Test di Grubbs
7	4	20	133	130	Outlier per Test di Grubbs
8	4	1	254	277	Outlier per Test di Grubbs
9	5	61	199	235	Outlier per Test di Grubbs
10	6	62	1559	1474	Outlier per Test di Grubbs
11	6	20	778	755	Outlier per Test di Grubbs
12	6	1	814	822	Outlier per Test di Grubbs
13	6	57	867	856	Outlier per Test di Grubbs
14	8	58	512	493	Outlier per Test di Grubbs
15	9	40	124	124	Outlier per Test di Grubbs

LEGENDA

	ripetibilità'
r	riproducibilità
R	scarto tipo della ripetibilità
Sr	scarto tipo della riproduzione
SR	ripetibilità espressa in unità di media
RSDr	riproducibilità espressa in unità di media
RSDR	frazione di RSDR dovuta alla differenza fra i laboratori
RSDL	outlier
OUT	




RING TEST CELLULE SOMATICHE LUGLIO 2009 LATTE VACCINO ORDINAMENTO LABORATORI

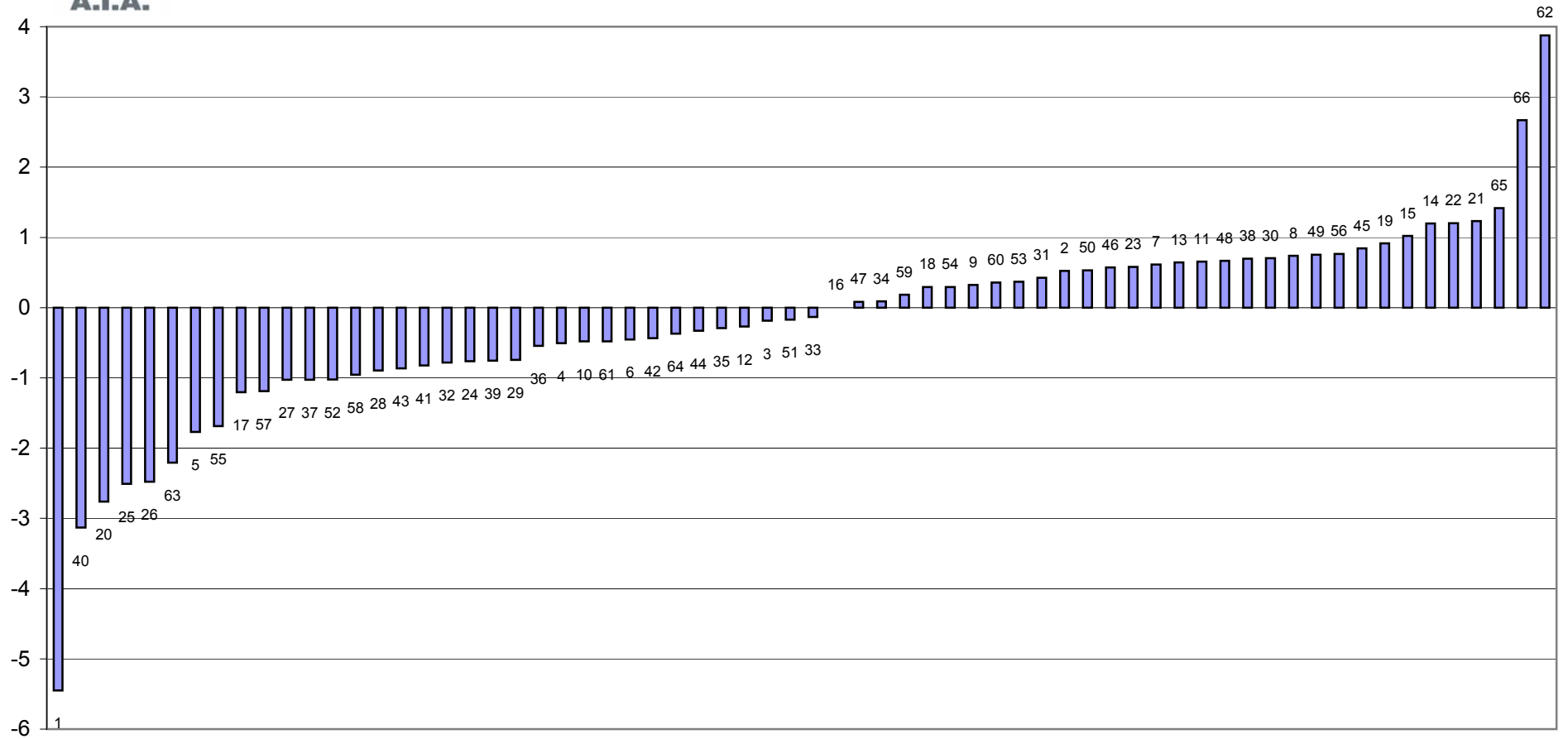



RING TEST CELLULE SOMATICHE LUGLIO 2009
media delle differenze dalla mediana e scarto tipo delle differenze
CONTENUTO IN CELLULE SOMATICHE x1000/ml

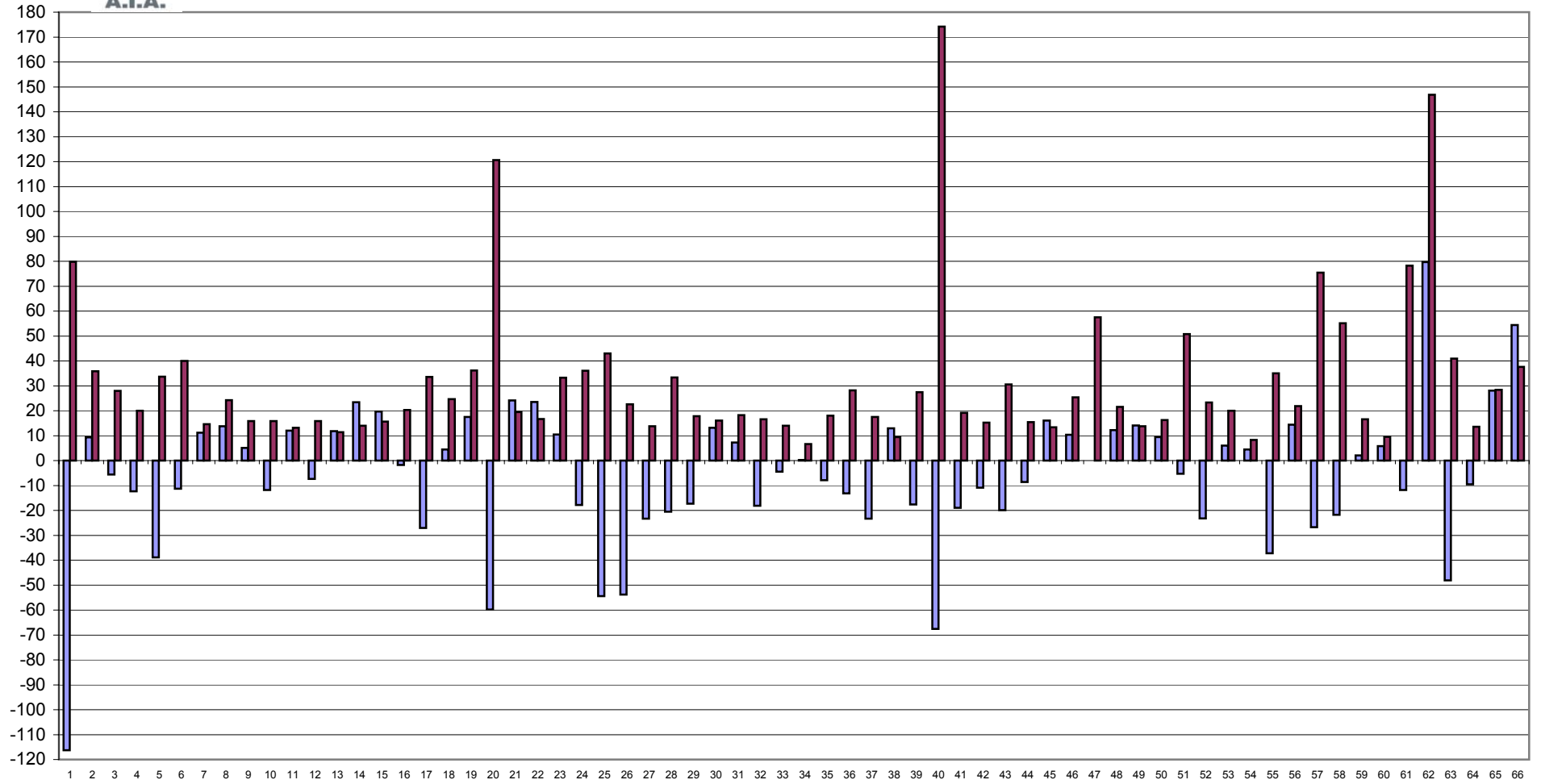

■ media ■ scarto tipo



RING TEST CELLULE SOMATICHE LUGLIO 2009
CONTENUTO IN CELLULE SOMATICHE X 1000/ml
LATTE VACCINO

